

Antes de comenzar una prueba, lea atentamente las instrucciones de uso.

## INTRODUCCIÓN

La Prueba de Embarazo Digital es una detección rápida y cualitativa de gonadotropina coriónica humana ("HCG") en orina, adecuada para el diagnóstico precoz del embarazo. El equipo es un equipo médico IVD de autoprueba diseñado por el fabricante para que lo utilicen personas no profesionales en un entorno doméstico. Sólo para uso diagnóstico in vitro.

## ¿COMO FUNCIONA?

La gonadotropina coriónica humana (HCG) es una hormona producida por la placenta en desarrollo poco después de la concepción y secretada en la orina. La prueba de embarazo digital puede detectar pequeñas cantidades de esta hormona en la orina.

Después de aplicar una cantidad adecuada de muestra de orina a la prueba de embarazo digital, ésta muestra directamente los resultados de "Embarazada", "Embarazada >10", "No embarazada" o "Error" en la pantalla. Es un método preciso, rápido y conveniente para el diagnóstico precoz del embarazo.



## CONTENIDO DEL KIT DE PRUEBA

- Una bolsa sellada que contiene: una prueba de embarazo digital en barra desecante (el desecante es solo para fines de almacenamiento y no se utiliza en los procedimientos de prevención).
- Prospecto

## ¿QUE MÁS NECESITAS?

Un recipiente limpio y seco, de plástico o vidrio, para recoger la orina.

## PRECAUCIONES:

- Esta prueba es únicamente para uso de diagnóstico in vitro. No lo tragues.
- Deséchelo después del primer uso. La prueba no se puede reutilizar.
- No utilice el kit de prueba más allá de la fecha de vencimiento.
- No utilice el kit si la bolsa está perforada o no está bien sellada.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantenga su mano seca y limpia antes y durante la prueba.
- No utilice el producto al aire libre.
- Los procedimientos deben seguirse con precisión para obtener resultados precisos.
- No desmonte la batería. La batería no es desmontable ni intercambiable.
- Siga las normativa locales para desechar las pruebas usadas.
- Este dispositivo cumple con los requisitos de emisiones electromagnéticas de EN61326. Por tanto, su emisión electromagnética es baja. No se esperan interferencias de otros equipos eléctricos. Esta prueba no debe utilizarse cerca de fuentes de fuerte radiación electromagnética, por ejemplo teléfono móvil, ya que podría impedir que la prueba funcione correctamente. Para evitar descargas electrostáticas, no utilice la prueba en un ambiente muy seco, especialmente uno en el que haya materiales sintéticos presentes.

## ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

- Conservar entre 2°C y 30°C en la bolsa sellada hasta la fecha de caducidad.
- Mantener alejado de la luz solar directa, la humedad y el calor.
- No congelar.
- Preferiblemente abra la bolsa poco antes de la prueba.

## RECOLECCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS

Puede realizar la prueba directamente en el chorro de orina o puede recolectar la orina con un recipiente para orina desechable o un recipiente limpio y analizarla. Cualquier muestra de orina es apropiada para el kit de prueba. Si la muestra de orina no puede utilizarse inmediatamente, debe almacenarse a 4 °C y recuperarse a temperatura ambiente antes de su uso. La orina almacenada durante más de 2 días no es adecuada para la prueba.

## ¿CÓMO HACER LA PRUEBA?

**Nota:** No retire el dispositivo de la bolsa de aluminio hasta que esté listo para usarlo. Para comenzar la prueba, lea atentamente las instrucciones y realice la prueba a temperatura ambiente (entre 15 °C y 30 °C).

### Paso 1:

Retire un Test de embarazo digital Aposán de la bolsa de aluminio rasgándolo por la muesca. Retire la tarjeta de plástico y siga la dirección de la flecha, luego podrá iniciar la prueba (consulte la Fig.1). Sostenga la empuñadura con una mano y saque la tapa y esponja el absorbente con la otra mano. **Durante la prueba, nunca sostenga el test de embarazo Aposán de prueba con la punta absorbente apuntando hacia arriba.**



La punta absorbente de la prueba NO DEBE apuntar hacia arriba

### Paso 2:

El usuario puede optar por realizar la prueba en el chorro de orina o con muestras en un recipiente.

#### Prueba n.º 1 en flujo de orina

- Sostenga la punta absorbente apuntando hacia abajo en el chorro de orina (consulte la Fig. 2). **No orine en las otras partes de la prueba excepto en la punta absorbente.**
- El símbolo del reloj de arena aparecerá en la pantalla (consulte la Fig.4).
- En aproximadamente 10 segundos, el símbolo del reloj de arena comenzará a parpadear y luego retire el dispositivo del chorro de orina y mantenga la punta absorbente apuntando hacia abajo o coloque el dispositivo de prueba en posición horizontal. Es posible que desee reemplazar la tapa.

#### #2 Prueba con muestras en contenedor

- Recoja su orina en un vaso limpio y seco. Sumerja toda la punta absorbente en la orina (consulte la Fig. 3). **Tenga cuidado de no mojar el resto del Test de embarazo Aposán.**
- El símbolo del reloj de arena aparecerá en la pantalla (consulte la Fig.4).
- En aproximadamente 10 segundos, el símbolo del reloj de arena comenzará a parpadear y luego retire el dispositivo de la orina y mantenga la punta absorbente apuntando hacia abajo o coloque el dispositivo de prueba en posición horizontal. Es posible que desee reemplazar la tapa.

### Paso 3:

El símbolo del reloj de arena seguirá parpadear para mostrar que la prueba está funcionando. Al cabo de 5 minutos, el símbolo del reloj de arena dejará de parpadear y luego la pantalla mostrará el resultado.

Si el símbolo del reloj de arena no aparece después de haber utilizado la prueba, consulte la pregunta 4 en **PREGUNTAS Y RESPUESTAS.**



Fig. 1

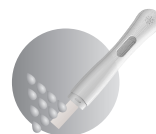


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

## ¿CÓMO LEER LOS RESULTADOS?

### Negativo (no embarazada):

Cuando la pantalla muestra "No embarazada", indica que no se ha detectado ningún embarazo.

### Positivo (embarazada o embarazada >10):

Cuando la pantalla muestra "Embarazada", indica que está embarazada de los primeros 10 días. Si en la pantalla aparece "Embarazada >10", indica que el embarazo es de entre 11 y 28 días.

**No válido (error):**

Cuando la pantalla muestra "Error", indica que la prueba falla, no es válida o se utiliza. Repita con una nueva prueba.

Pantalla de visualización	Resultado	Cómo los médicos determinan el tiempo de embarazo (basado en 28 días de período)
	No embarazada	—
	Embarazada	Embarazo aproximado primeros 10 días.
	Embarazada	Embarazo, aproximadamente 11 a 28 días
	No válido	—

**LIMITACIONES**

1. Como ocurre con cualquier procedimiento de diagnóstico, un médico solo debe realizar un diagnóstico de embarazo confirmado después de evaluar todos los hallazgos clínicos y de laboratorio.
2. El dispositivo sólo es adecuado para orina humana.
3. Si una muestra de orina está demasiado diluida (es decir, tiene una gravedad específica baja), es posible que no contenga un nivel representativo de HCG. Si aún se sospecha un embarazo, se debe recolectar otra muestra de orina 48 horas después y analizarla.
4. Una baja concentración de HCG en las primeras etapas del embarazo puede dar un resultado negativo. En este caso, se debe obtener otra muestra al menos 48 horas después y analizarla.
5. Cualquier procedimiento médico que involucre HCG, como un tratamiento de fertilidad, puede causar resultados falsos positivos. Consulte a su médico.
6. Tenga en cuenta que un recipiente sucio o una operación incorrecta también provocarán resultados falsos.
7. Puede ocurrir una desviación en la determinación del tiempo de embarazo si está embarazada de 28 días o más. Los negativos no se verán afectados.

**CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN**

**Sensibilidad**

La prueba de embarazo digital detectará una concentración de hCG en orina de 25 mIU/ml o más.

**Especificidad**

La especificidad de la prueba de embarazo digital se determinó a partir de estudios de reactividad cruzada con cantidades conocidas de hormona luteinizante (hLH), hormona folículo estimulante (hFSH) y hormona estimulante de la tiroides (hTSH). Se obtuvieron resultados negativos en todas las pruebas realizadas con 300 mIU/ml hLH, 1000 mIU/ml hFSH y 1000 µIU/ml de hTSH.

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS**

**1. ¿Cuándo debo realizar la prueba con un test de embarazo digital?**

Normalmente, la prueba de embarazo digital se puede utilizar 2 días antes de la fecha prevista de su período.

**2. ¿Qué precisión tiene la prueba?**

Se realizó una evaluación clínica mediante el test de embarazo digital Aposán. Los resultados demostraron una precisión general >99 % de la prueba de embarazo digital en comparación con los resultados clínicos.

**3. ¿Qué momento de la orina es mejor para la detección?**

Cualquier muestra de orina es apropiada para la prueba de embarazo, pero la primera muestra de orina de la mañana es óptima debido a su mayor concentración de HCG.

**4. He utilizado el test, pero no me ha aparecido el símbolo del Reloj de Arena. ¿Qué quiere decir esto?**

El test no ha funcionado correctamente. Debe repetir la prueba con un dispositivo nuevo o comunicarse con el distribuidor o la tienda donde compró el producto con el número de lote.

**5. ¿Cómo identificar si la potencia es suficiente para realizar una prueba?**

Realice la prueba estrictamente de acuerdo con el procedimiento especificado en las instrucciones. Si no hay respuesta en la pantalla, indica que la batería está apagada.

**6. ¿Podría algún medicamento o condición médica afectar el resultado?**

Lea siempre las instrucciones del fabricante de cualquier medicamento que esté tomando antes de realizar la prueba. Los medicamentos para la fertilidad que contienen HCG pueden dar resultados engañosos. Estos medicamentos para la fertilidad generalmente se administran mediante inyección y la prueba demasiado pronto después de la administración puede dar un resultado falso de "Embarazada". Es poco probable que otras terapias de fertilidad, analgésicos y anticonceptivos hormonales (por ejemplo, píldoras anticonceptivas) afecten al resultado. Si está en la menopausia o se acerca a ella, puede obtener un resultado falso positivo aunque no esté embarazada. El embarazo ectópico y los quistes ováricos pueden dar resultados engañosos. Si obtiene resultados inesperados, debe comentarlos con su médico.

**7. ¿Qué debo hacer cuando mi prueba dice que estoy embarazada?**

Si su resultado es "Embarazada" o "Embarazada >10", debe consultar a su médico, quien podrá aconsejarle qué pasos debe seguir a continuación.

**8. ¿Qué debo hacer cuando mi prueba dice que no estoy embarazada?**

Es posible que no esté embarazada o que el nivel de la hormona del embarazo aún no sea lo suficientemente alto como para ser detectado, o que haya calculado mal el día en que debería tener su período. Si se hizo la prueba temprano, hágala nuevamente cuando llegue el momento de su período. Si su período está retrasado, vuelva a realizar la prueba dentro de los 7 días. Si esta prueba te da un resultado de "No Embarazada" y aún no has tenido tu período, consulta con tu médico para descartar las enfermedades ginecológicas.

**9. ¿Se puede utilizar el dispositivo repetidamente?**

No. El dispositivo es para un solo uso. Si se utiliza el dispositivo, el resultado de la prueba se mostrará en la pantalla durante un período y este dispositivo no deberá reutilizarse más.

**CÓMO DESHACERSE DE SU PRUEBA**

Retire la batería antes de desechar la varilla de prueba. La eliminación de las baterías debe realizarse de acuerdo con el plan de reciclaje adecuado. Para retirarla, inserte una moneda en la ranura del extremo y gírela para abrir la parte posterior de la varilla reactiva. Si la batería no está visible, deslice el soporte de la batería hacia afuera en la dirección de la flecha para facilitar su extracción. Precaución: No desmonte, recargue ni arroje las baterías al fuego.

**BIBLIOGRAFÍA:**

1. Canfield RE, Morgan FJ, Kammerman S, Bell JJ, Agosto GM. Estudios de gonadotropina coriónica humana. Res reciente de hormonas progresivas. 1971; 27:121-164.
2. Ross GT. Relevancia clínica de la investigación sobre la estructura de la gonadotropina coriónica humana. Revista Estadounidense de Obstetricia y Ginecología 1977; 129:795.

**EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS EN EL PAQUETE:**

	Consultar instrucciones de uso.		Numero de lote
	Sólo para uso diagnóstico in vitro		Mantener seco
	Conservar entre 2 °C y 30 °C		Representante autorizado
	Mantener alejado de la luz solar		No reutilizar
	Prueba por kit		WEEE (2002/96/EC)
	Uso por		Fabricante
			Importador
	Distribuidor		Referencia

**Distribuido por:** Grupo Cofares.  
**Distribuido en Portugal por:** Disfaline, Lda.  
Av. António Augusto de Aguiar, nº19, 4º dto., Sala B 1050-012 Lisboa

Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd.  
Address 3787#. East Yangguang Avenue. Dipu Street  
Anji 313300. Huzhou. Zhejiang, China.

QARAD B.V.  
Cipalstraat 3. 2440 Geel Belgium.

Sanavita Pharmaceuticals GmbH  
Spaldingstraße 110b · 20097 Hamburg · Germany

Antes de iniciar um teste, leia atentamente as Instruções de utilização.

## INTRODUÇÃO

O Teste Digital de Gravidez é uma detecção rápida e qualitativa de gonadotrofina coriônica humana (“HCG”) na urina, adequado para o diagnóstico precoce de gravidez. O equipamento é um dispositivo médico de autoteste IVD projetado pelo fabricante para uso por não profissionais em ambiente doméstico. Apenas para uso em diagnóstico in vitro.

## COMO FUNCIONA?

A gonadotrofina coriônica humana (HCG) é uma hormona produzida pela placenta em desenvolvimento logo após a concepção e secretada na urina. O teste de gravidez digital pode detectar pequenas quantidades desse hormônio na urina.

Após aplicar uma quantidade adequada de amostra de urina ao teste de gravidez digital, ele exibe diretamente os resultados de “Grávida”, “Grávida > 10”, “Não grávida” ou “Erro” na tela. É um método preciso, rápido e conveniente para o diagnóstico precoce da gravidez.



## CONTEÚDO DO KIT DE TESTE

1. 1 saco selado contendo: bastão de teste de gravidez digital essecante (o dessecante é apenas para fins de armazenamento e não é usado nos procedimentos de prevenção).
2. 1 folheto

## NECESSITA DE MAIS ALGUMA COISA?

Um recipiente de plástico ou vidro limpo e seco para recolher a urina.

## PRECAUÇÕES

1. Este teste é apenas para uso em diagnóstico in vitro. Não engula.
2. Descarte após o primeiro uso. O teste não pode ser reutilizado.
3. Não utilize o kit de teste após o prazo de validade.
4. Não utilize o kit se o saco estiver perfurado ou não estiver devidamente vedado.
5. Mantenha fora do alcance das crianças.
6. Mantenha as mãos secas e limpas antes e durante o teste.
7. Não utilize o produto ao ar livre.
8. Os procedimentos devem ser seguidos com precisão para obter resultados precisos.
9. Não desmonte a bateria.  
A bateria não é removível ou intercambiável.
10. Siga os regulamentos locais para descarte de testes usados.
11. Este dispositivo está em conformidade com os requisitos de emissões eletromagnéticas da EN61326. Portanto, a sua emissão eletromagnética é baixa. Nenhuma interferência é esperada de outros equipamentos elétricos. Este teste não deve ser utilizado perto de fontes de forte radiação eletromagnética, por ex. telefone celular, pois pode impedir o funcionamento correto do teste. Para evitar descargas eletrostáticas, não utilize o teste em ambientes muito secos, especialmente onde estejam presentes materiais sintéticos.

## ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

1. Conservar entre 2°C e 30°C no saco lacrado até a data de validade.
2. Mantenha longe da luz solar direta, humidade e calor.
3. Não congele.
4. De preferência, abra a bolsa um pouco antes do teste.

## RECOLHA E PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS

Você pode realizar o teste diretamente no jato de urina ou recolher a urina com um recipiente descartável ou limpo e analisá-la. Qualquer amostra de urina é apropriada para o kit de teste. Se a amostra de urina não puder ser detectada imediatamente, ela deverá ser armazenada a 4°C e recuperada à temperatura ambiente antes do uso. A urina armazenada por mais de 2 dias não é adequada para teste.

## COMO FAZER O TESTE?

**Observação:** Não remova o dispositivo da embalagem de alumínio até que esteja pronto para usá-lo. Para iniciar o teste, leia atentamente as instruções e realize o teste a temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C).

### Passo 1:

Remova o Teste De Gravidez Digital Aposán da embalagem de alumínio rasgando-o no entalhe. Retire o cartão plástico e siga a direção da seta, então pode iniciar o teste (ver Fig.1). Segure a pega com uma mão e retire a tampa e exponha o absorvente com a outra mão. **Durante o teste, nunca segure o Teste De Gravidez Digital Aposán com a ponta absorvente voltada para cima.**



La punta absorbente de la prueba NO DEBE apuntar hacia arriba

### Passo 2:

O usuário pode optar por realizar o teste no jato de urina ou com amostras em recipiente.

#### Teste de fluxo de urina nº 1

1. Segure a ponta do absorvente apontando para baixo no jato de urina (ver Fig. 2). Não urine nas outras partes do teste, exceto na ponta absorvente.
2. O símbolo da ampulheta aparecerá na tela (ver Fig.4).
3. Em cerca de 10 segundos, o símbolo da ampulheta começará a piscar e, em seguida, remova o dispositivo do jato de urina e mantenha a ponta absorvente voltada para baixo ou coloque o dispositivo de teste horizontalmente. Pode querer substituir a tampa.

ou

#### #2 Teste com amostra em recipiente

1. Recolha a urina em um copo limpo e seco. Mergulhe toda a ponta absorvente na urina (ver Fig. 3). **Tenha cuidado para não molhar o restante do Teste De Gravidez Digital Aposán.**
2. O símbolo da ampulheta aparecerá na tela (ver Fig.4).
3. Em cerca de 10 segundos, o símbolo da ampulheta começará a piscar e, em seguida, remova o dispositivo da urina e mantenha a ponta absorvente voltada para baixo ou coloque o dispositivo de teste horizontalmente. Pode querer substituir a tampa.

### Passo 3:

O símbolo da ampulheta continuará a piscar para mostrar que o teste está a funcionar. Após 5 minutos, o símbolo da ampulheta irá parar de piscar e a tela mostrará o resultado.

Se o símbolo da ampulheta não aparecer após a utilização do teste, consulte a pergunta 4 em **PERGUNTAS E RESPOSTAS**.



Fig. 1

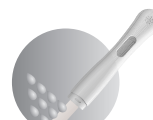


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

## COMO LER OS RESULTADOS?

### Negativo (não grávida):

Quando o display mostra “Not Pregnant”, indica que nenhuma gravidez foi detectada.

### Positivo (grávida ou grávida >10):

Quando a tela mostra “Grávida”, indica que está grávida nos primeiros 10 dias. Se o display mostrar “Grávida >10”, indica que está grávida entre 11 e 28 dias de gravidez.

**Inválido (erro):**

Quando o display mostra "Erro", indica que o teste falhou, é inválido ou está em uso. Repita com um novo teste.

Ecrã de visualização	Resultado	Como os médicos determinam o tempo de gravidez (com base em 28 dias de menstruação)
	Não grávida	—
	Grávida	Gravidez aproximada nos primeiros 10 dias.
	Grávida	Gravidez, aproximadamente 11 a 28 dias
	Não é válido	—

**LIMITAÇÕES**

1. Tal como acontece com qualquer procedimento de diagnóstico, o médico só deve fazer um diagnóstico confirmado de gravidez após avaliar todos os resultados clínicos e laboratoriais.
2. O dispositivo é adequado apenas para urina humana.
3. Se uma amostra de urina estiver muito diluída (ou seja, tiver uma gravidade específica baixa), poderá não conter um nível representativo de HCG. Se ainda houver suspeita de gravidez, outra amostra de urina deve ser recolhida 48 horas depois e analisada.
4. Uma baixa concentração de HCG nos primeiros estágios da gravidez pode dar um resultado negativo. Neste caso, outra amostra deverá ser obtida pelo menos 48 horas depois e analisada.
5. Qualquer procedimento médico que envolva HCG, como tratamento de fertilidade, pode causar resultados falsos positivos. Consulte o seu médico.
6. Observe que um recipiente sujo ou operação incorreta também causará resultados falsos.
7. Pode ocorrer um desvio na determinação do tempo de gravidez se estiver grávida de 28 dias ou mais. Os negativos não serão afetados.

**RECURSOS DE APRESENTAÇÃO**

**Sensibilidade**

O teste digital de gravidez detectará uma concentração de hCG na urina de 25 mIU/ml ou mais.

**Especificidade**

A especificidade do teste de gravidez digital foi determinada a partir de estudos de reatividade cruzada com quantidades conhecidas de hormona luteinizante (hLH), hormona foliculo-estimulante (hFSH) e hormona estimulador da tireoide (hTSH). Resultados negativos foram obtidos em todos os testes realizados com 300 mIU/ml de hLH, 1000 mIU/ml de hFSH e 1000 µIU/ml de hTSH.

**PERGUNTAS E RESPOSTAS**

**1. Quando devo fazer o Teste com um Teste de Gravidez Digital?**

Normalmente, o teste de gravidez digital pode ser usado 2 dias antes do início da menstruação.

**2. Quanto preciso é o teste?**

Foi realizada avaliação clínica por meio do Teste Digital de Gravidez. Os resultados demonstraram uma precisão global >99% do teste de gravidez digital em comparação com os resultados clínicos.

**3. Qual é o melhor horário da urina para detecção?**

Qualquer amostra de urina é apropriada para testes de gravidez, mas a primeira amostra de urina da manhã é ideal devido à sua maior concentração de HCG.

**4. Utilizei o Teste, mas o símbolo da Ampulheta não apareceu. O que significa?**

O teste não funcionou corretamente. Deve repetir o teste com um novo teste ou entrar em contacto com o distribuidor ou estabelecimento onde adquiriu o produto com o número do lote.

**5. Como identificar se a potência é suficiente para realizar um teste?**

Realize o teste estritamente de acordo com o procedimento especificado nas instruções. Se não houver resposta na tela, indica que a bateria está descarregada.

**6. Algum medicamento ou condição médica poderia afetar o resultado?**

Leia sempre as instruções do fabricante de qualquer medicamento que esteja a tomar antes de fazer o teste. Medicamentos para a fertilidade contendo HCG podem dar resultados enganosos. Estes medicamentos para a fertilidade são geralmente administrados por injeção e os testes logo após a administração podem dar um resultado falso de "Grávida". É improvável que outras terapias de fertilidade, analgésicos e contraceptivos hormonais (por exemplo, pílulas anticoncepcionais) afetem o resultado. Se estiver na menopausa ou a aproximar-se dela, poderá obter um resultado falso positivo, mesmo que não esteja grávida. A gravidez ectópica e os quistos nos ovários podem dar resultados enganosos. Se obtiver resultados inesperados, deve discuti-los com o seu médico.

**7. O que devo fazer quando o meu teste indicar que estou grávida?**

Se o seu resultado for "Grávida" ou "Grávida >10", deverá consultar o seu médico, que a poderá aconselhar sobre os próximos passos a tomar.

**8. O que devo fazer quando o meu teste indicar que não estou grávida?**

Pode não estar grávida, ou o seu nível de hormonas da gravidez pode ainda não ser suficientemente elevado para ser detectado, ou pode ter calculado mal o dia em que vai ter o período. Se fez o teste cedo, faça-o novamente quando chegar a altura do seu período. Se o seu período estiver atrasado, faça um novo teste dentro de 7 dias. Se este teste der um resultado de "Não grávida" e ainda não tiver tido o período, consulte o seu médico para excluir doenças ginecológicas.

**9. O dispositivo pode ser usado repetidamente?**

Não. O dispositivo é apenas para uso único. Se o dispositivo for utilizado, o resultado do teste será exibido na tela por um período e este dispositivo não deverá ser reutilizado novamente.

**COMO DESCARTAR O SEU TESTE**

Remova a bateria antes de descartar a vareta de teste. A eliminação das baterias deve ser efectuada de acordo com o plano de reciclagem adequado. Para remover, insira uma moeda na ranhura da extremidade e gire para abrir a parte traseira da vareta. Se a bateria não estiver visível, deslize o suporte da bateria na direção da seta para facilitar a remoção.

Cuidado: Não desmonte, recarregue ou descarte as baterias ao fogo.

**BIBLIOGRAFIA:**

1. Canfield RE, Morgan FJ, Kammerman S, Bell JJ, Agosto GM. Estudios de gonadotropina coriónica humana. Res reciente de hormonas progresivas. 1971; 27:121-164.
2. Ross GT. Relevancia clínica de la investigación sobre la estructura de la gonadotropina coriónica humana. Revista Estadounidense de Obstetricia y Ginecologia 1977; 129:795.

**EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS NA EMBALAGEM:**

	Consulte as instruções de uso.		Código de lote
	Somente para uso diagnóstico em vitro		Manter seco
	Mantenha entre 2°C e 30°C		Representante autorizado
	Para manter distância da luz solar		Não reutilizar
	Prueba por kit		WEEE (2002/96/EC)
	Teste por kit		Fabricante
	CE 0123		Importador
	Distribuidor		Referencia

**Distribuído por:** Grupo Cofares.  
**Distribuído em Portugal por:** Disfaline, Lda.  
Av. António Augusto de Aguiar, nº19, 4º dto., Sala B 1050-012 Lisboa

Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd.  
Address 3787#. East Yangguang Avenue. Dipu Street  
Anji 313300. Huzhou. Zhejiang, China.

QARAD B.V:  
Cipalstraat 3. 2440 Geel Belgium.

Sanavita Pharmaceuticals GmbH  
Spaldingstraße 110 b · 20097 Hamburg · Germany







# L-PTDOCO0-00 printproof 20250115- komprimiert

Abschließender Prüfbericht

2025-01-15

Erstellt:	2025-01-15
Von:	Digital Unterschrift (signatur@wr-group.com)
Status:	Signiert
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAis4Zrhn6cu-cFyLhhsxgolPpobVRuCuQ

## Verlauf für „L-PTDOCO0-00 printproof 20250115-komprimiert“

-  Digital Unterschrift (signatur@wr-group.com) hat das Dokument erstellt.  
2025-01-15 - 12:43:53 GMT
-  Dokument wurde per E-Mail zur Signatur an mariola.matura@sanavita.net gesendet.  
2025-01-15 - 12:44:00 GMT
-  mariola.matura@sanavita.net hat die E-Mail angezeigt.  
2025-01-15 - 14:42:24 GMT
-  Die signierende Person mariola.matura@sanavita.net hat bei der Signatur den Namen Mariola Matura eingegeben  
2025-01-15 - 14:42:39 GMT
-  Mariola Matura (mariola.matura@sanavita.net) hat das Dokument mit einer E-Signatur versehen.  
Signaturdatum: 2025-01-15 – 14:42:41 GMT – Zeitquelle: Server
-  Vereinbarung abgeschlossen.  
2025-01-15 - 14:42:41 GMT